



Массажная накидка  
**Rebodi B01**



**ИНСТРУКЦИЯ  
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**



Благодарим вас за покупку! Перед использованием внимательно изучите данное руководство, особенно раздел «Меры предосторожности», чтобы обеспечить правильную и безопасную эксплуатацию прибора. Сохраните руководство в надлежащем состоянии для удобного обращения.

## Содержание

Важные меры предосторожности.....	5
Техническое обслуживание.....	8
Устранение типичных неполадок.....	8
Подготовка к работе.....	8
Комплектация.....	9
Панель управления.....	10
Рекомендации по устранению неполадок.....	11
Технические характеристики.....	12
Условия гарантии.....	13
Гарантийный талон.....	14



## Важные меры предосторожности

### Важно

- Перед использованием внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации.
- Для предотвращения короткого замыкания, не допускайте попадания воды на прибор.
- Используйте только адаптер, соответствующий техническим характеристикам прибора.
- Для вашей безопасности после использования и перед чисткой прибора отключайте его от сети.
- Используйте прибор только в помещении.
- Рекомендуемая продолжительность одной процедуры – 15 минут.
- Перед использованием проверьте прибор на наличие повреждений. При обнаружении повреждений немедленно прекратите использование и не пытайтесь самостоятельно разбирать или ремонтировать прибор. Обратитесь в сервисный центр.
- Не используйте прибор с повреждённым покрытием.
- Не допускайте попадания посторонних предметов внутрь прибора.
- Не засыпайте во время использования прибора.
- Не используйте прибор в состоянии алкогольного опьянения или недомогания.
- Не используйте прибор в течение часа после еды.
- Для предотвращения травм не устанавливайте максимальную интенсивность массажа с самого начала процедуры.
- Поддерживайте штепсельную вилку в чистоте, не допускайте попадания на неё воды, мусора или посторонних предметов.
- При повреждении сетевого кабеля не пытайтесь производить ремонт самостоятельно. Обратитесь в сервисный центр для обеспечения безопасности.

## **Предупреждения**

- Прибор следует использовать в сухих помещениях, избегая мест с повышенной влажностью, таких как ванная комната.
- Не используйте прибор при резких перепадах температуры, в запылённых, загрязнённых или агрессивных средах, а также в помещениях с плохой вентиляцией.
- Не эксплуатируйте прибор при температуре окружающей среды выше 40°C или ниже 5°C (при низких температурах загустение смазки может привести к повышенному трению между деталями).
- Во время грозы отключайте прибор от сети.
- Прибор следует устанавливать на ровной устойчивой поверхности, вдали от источников огня и прямых солнечных лучей.
- После переноса прибора из холодного помещения в тёплое, для предотвращения негативного воздействия конденсата на работу прибора, выдержите его при комнатной температуре в течение часа перед использованием.

## **Перед использованием устройства проконсультируйтесь с врачом в следующих случаях:**

- При остеопорозе;
- При заболеваниях сердечно-сосудистой системы, а также при использовании электронных медицинских имплантатов (например, кардиостимуляторов);
- При повышенной температуре тела;
- При беременности или менструации;
- При кожных заболеваниях или травмах;
- При нахождении на больничном или при недомогании;
- При повышенной потливости (использование прибора категорически запрещено);
- При прохождении медицинского лечения, особенно при наличии противопоказаний к физиотерапевтическим процедурам;
- При наличии открытых ран;
- При пониженной чувствительности к теплу следует соблюдать осторожность при использовании.

## Важно

- Не ставьте на прибор тяжёлые предметы.
- Прибор предназначен для использования одним пользователем.
- Убедитесь, что напряжение сети соответствует указанному в технических характеристиках.
- Не вынимайте вилку из розетки мокрыми руками.
- Не допускайте попадания жидкости внутрь прибора во избежание поражения электрическим током и повреждения.
- Не тяните и не дёргайте за шнур питания при отключении от сети. Отсоединяйте вилку аккуратно.
- Не повреждайте проводку и не пытайтесь изменять электрическую схему прибора.
- Не используйте влажные салфетки для очистки электрических компонентов (выключатель, розетка).
- Во время отключения электроэнергии держитесь на безопасном расстоянии от прибора, чтобы избежать травм при внезапном восстановлении напряжения.
- При обнаружении любых неисправностей немедленно прекратите использование и свяжитесь с сервисным центром.
- При появлении недомоганий прекратите использование и проконсультируйтесь с врачом.
- При повреждении сетевого кабеля его замена должна производиться только специалистами сервисного центра во избежание опасности.
- Перед перемещением прибора выключите его и извлеките вилку из розетки.
- При обнаружении повреждений, поломок, утечки электричества или оголённых проводов немедленно прекратите использование прибора.

## Техническое обслуживание

Техническое обслуживание прибора должно производиться квалифицированными специалистами. Самостоятельный ремонт и разборка запрещены.

- После каждого использования выключайте прибор из сети.
- Не используйте прибор, если розетка шатается или плохо держится.
- При длительном хранении прибора сматывайте сетевой кабель и храните устройство в сухом и чистом месте, защищённом от пыли.
- Не храните прибор при высокой температуре, вблизи источников огня и под прямыми солнечными лучами.
- Для чистки прибора используйте сухую мягкую ткань. Не используйте растворители, бензин или спирт.
- Не направляйте острые предметы на прибор.
- Рекомендуется использовать прибор с перерывами. Не допускайте длительной непрерывной работы.


## Устранение типичных неполадок

- При неисправности пульта дистанционного управления проверьте надёжность подключения вилки к розетке и включите прибор повторно.
- При длительной непрерывной работе прибор автоматически отключится (срабатывание защиты от перегрева). Перед повторным включением сделайте перерыв не менее 30 минут.

## Подготовка к работе

1. Установите массажную накидку вертикально на диване или кресле. Для фиксации используйте эластичный ремень на задней стороне накидки.
2. Подключите адаптер питания к разъёму на массажной накидке, затем подключите адаптер к розетке электрической сети.
3. Удобно расположитесь, обеспечив плотное прилегание спины и шеи к поверхности накидки.

## Комплектация

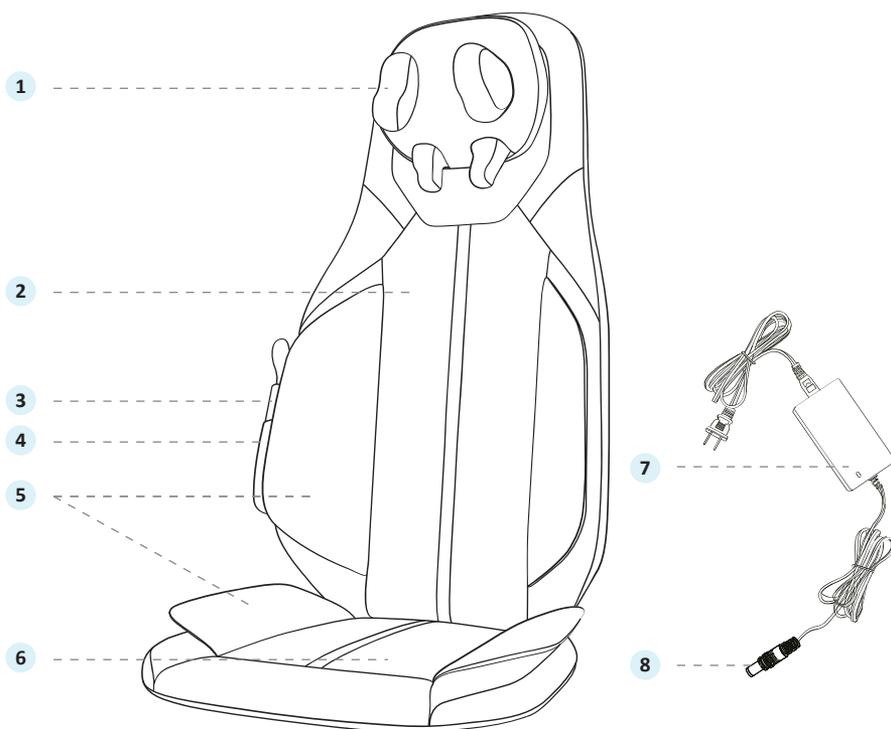

- 1 Массажные валики для массажа шеи
- 2 Массажные валики для массажа спины
- 3 Пульт управления
- 4 Карман для хранения пульта управления
- 5 Воздушно-компрессионные подушки
- 6 Сидение
- 7 Сетевой адаптер
- 8 Кабель питания

## Панель управления

### 1 Регулировка высоты валиков:

Нажмите и удерживайте кнопку регулировки для комфортного положения валиков.

**2-3 Режим массажа шеи:** «Разминание» и «Шиаци».

**4 Зоны массажа спины:** Выберите зону массажа: вся спина, верхняя часть спины или нижняя часть спины.

**5 Точечный массаж:** Эта функция позволяет сконцентрировать массаж на определённой точке.

**6 Режим воздушно-компрессионного массажа:** Включение и переключение режимов воздушно-компрессионного массажа:

- Режим 1: Массаж зоны поясницы и ягодиц. Индикатор быстро мигает.
- Режим 2: Массаж зоны поясницы. Индикатор медленно мигает.
- Режим 3: Массаж ягодиц. Индикатор горит постоянно. Повторное нажатие выключает функцию. Индикатор гаснет.

**7 Регулировка интенсивности воздушно-компрессионного массажа.** 3 уровня.

**8** Кнопки включение/выключение вибрации и регулировка интенсивности вибрации сиденья. 3 уровня.


**9** Кнопки включение/выключение функции подогрева. Индикатор горит при включении и гаснет при выключении.

**10** Авторежим. Включает все функции массажа: вибрация (низкий уровень), воздушно-компрессионный массаж (низкий уровень), подогрев (включён), режим массажа всей спины, режим массажа шеи («Разминание»). Индикатор кнопки «Авто» горит постоянно.

**11** Кнопка включение/выключение массажной накидки. Индикатор питания горит при включении.

• Автоматическое выключение: Устройство выключается автоматически через 15 минут работы.

• Ручное выключение: Нажмите кнопку питания для выключения. Индикатор погаснет.

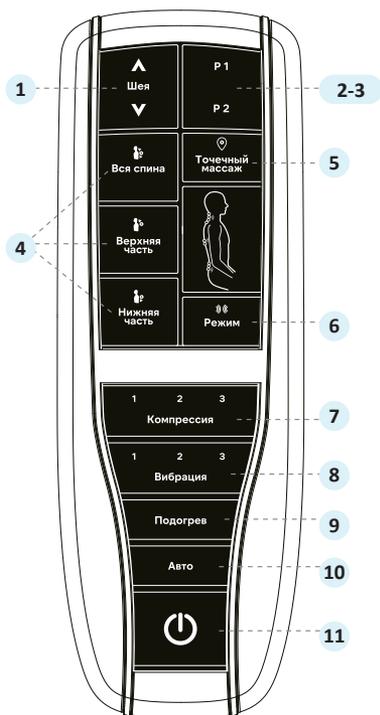

**Примечание:** После выключения массажные валики автоматически вернутся в исходное положение.

## Рекомендации по устранению неполадок

Прежде чем обратиться в поддержку, проверьте возможные решения. Если проблема не устранена, не разбирайте и не ремонтируйте изделие, а сразу свяжитесь с сервисным центром.

№	Неисправность	Устранение
1	Во время работы можно услышать звуки трения	Это нормальный механический звук работы или звук трения между массажным роликом и чехлом. Никаких действий не требуется.
2	Устройство не работает	1.Сетевой адаптер некорректно подключён. Подключите согласно инструкции. 2.Устройство не включено. Нажмите кнопку Вкл/Выкл.
3	Резкая остановка во время работы	1.Питание отключено. Проверьте, подключена ли вилка к сети. 2.Номинальное время работы (15 минут) истекло. Устройство автоматически останавливается. Нажмите кнопку питания, чтобы перезапустить. 3.Если вы пользуетесь массажёром длительное время, может сработать защита от перегрева. Выключите массажёр и дайте ему остыть перед повторным использованием. 4.Массажные ролики возможно застряли. Уменьшите давление на устройство.

При возникновении проблем с массажёром оставьте заявку в сервисный центр.



## Технические характеристики

**Наименование:** Массажная накидка торговой марки «Rebodi»

**Модель:** Rebodi B01

**Напряжение:** 220-240 Вольт / ~50-60 Гц

**Номинальная потребляемая мощность:** 60 Вт

**Вес прибора:** 6 кг

**Вес с упаковкой:** 7 кг

**Габариты массажёра (Ш × В × Д):** 525 x 445 x 780 мм

**Рекомендуемое время непрерывной работы:** не более 15 минут

**Адрес места производства:** Building 1, No.30, QinFu Road, LiuYue South Community, HengGang Street, LongGang District, ShenZhen, China

Билдинг 1, № 30, Цинфу Роуд, Лиуюэ Саус Комьюнити, Хэнган Стрит, Лонган Дистрикт, Шэньчжэнь, Китай

**Изготовитель:** «Shenzhen Forrest Health Technology Co.,LTD»

**Тел.:** +86 139 2741 5158, sales1@forrestmassager.com

**Дата производства:** см. стикер на корпусе прибора

**Импортер:** ООО «МакТрейд», 188663, РФ, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г. п. Кузьмоловский, ул. Заводская, д. 3, корп. 361 А, пом. 182, тел. +7 (931) 337-6057, chilikin.maxx@gmail.com

## Условия гарантии

Гарантия предоставляется владельцу массажёра Rebodi. На устройство распространяется гарантийный срок в течение 1 (одного) года для домашнего использования. Если во время использования массажёра в нормальных условиях были обнаружены дефекты, фирма, согласно фактической дате получения письменного уведомления о дефектах в течение гарантийного периода, несёт ответственность за замену или ремонт устройства.

Данная гарантия не распространяется на повреждения в результате:

- Неправильного использования устройства, несоблюдения инструкций по эксплуатации;
- Использования принадлежностей, не поставляемых производителем или уполномоченным изготовителем;
- Ремонта или технического обслуживания в неуполномоченной компанией Rebodi ремонтной организации;
- Повреждений, которые не были вызваны производителем, в том числе повреждений при транспортировке;
- Несчастного случая, злоупотребления, порчи, неправильного обращения с устройством;
- Внесения несогласованных с производителем изменений в конструкцию.

Приобретайте официально поставляемую продукцию Rebodi – то есть ту, которая была предназначена Rebodi для реализации на территории Российской Федерации и официально ввезена в Россию уполномоченным импортёром. Официально поставляемая продукция комплектуется руководством по эксплуатации на русском языке, маркируется уникальным серийным номером с кодом импортёра, а также поддерживается электронной гарантией изготовителя по серийному номеру. При нелегальном ввозе продукции на территорию Российской Федерации нарушаются нормы таможенного законодательства и законодательства о защите прав интеллектуальной собственности. Авторизованные сервисные центры Rebodi не осуществляют бесплатную гарантийную поддержку продукции Rebodi, нелегально ввезённой в Россию.

Вы имеете право на гарантийное обслуживание только в тех авторизованных сервис-центрах, контактная информация которых указана в данном гарантийном талоне. Чтобы удостовериться, что изделие Rebodi предназначено для продажи на российском рынке и поддерживается гарантией Rebodi в указанных в данном гарантийном талоне сервисных центрах, вы можете проверить его серийный номер и получить соответствующее подтверждение от сервис-центра.

## Гарантийный талон

### Контактная информация авторизованного сервис-центра:

Компания «Maxmassage»

Адреса авторизованных сервисных центров в Москве и Санкт-Петербурге уточняйте на сайте [maxmassage.ru/remont](http://maxmassage.ru/remont) по телефону +7 (800) 222-32-11 (звонок бесплатный) или по электронной почте [remont@maxmassage.ru](mailto:remont@maxmassage.ru)

Быстро и удобно оставить заявку на ремонт можно через форму:

**[maxmassage.ru/remont](http://maxmassage.ru/remont)**

Для ускорения гарантийного обслуживания направьте заявку на диагностику и ремонт с подробным описанием дефекта устройства, приложенными фото или видео, отражающими суть проблемы. В письме укажите свои контактные данные, дату покупки, наименование фирмы-продавца и серийный № устройства.

Модель: Rebodi B01

Серийный номер (Serial no): \_\_\_\_\_

Фирма-продавец: \_\_\_\_\_

Дата продажи: \_\_\_\_\_

С условиями гарантии ознакомлен и согласен \_\_\_\_\_

(подпись покупателя)



Товар сертифицирован. Установленный производителем в соответствии с п. 2 ст. 5 Закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы данного изделия равен гарантийному сроку с даты продажи при условии, что изделие используется согласно правилам и рекомендациям, изложенным в настоящем руководстве по эксплуатации, и применяемым техническим стандартам. Информацию о соответствии можно найти по адресу: [www.maxmassage.ru](http://www.maxmassage.ru)





Представительство в России:  
Группа компаний «Maxmassage»  
[info@maxmassage.ru](mailto:info@maxmassage.ru)  
Тел: 8 (800) 3333-627

[maxmassage.ru](https://maxmassage.ru)