



Массажёр для головы
Rebodi H01



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Благодарим вас за покупку! Перед использованием внимательно изучите данное руководство, особенно раздел «Меры предосторожности», чтобы обеспечить правильную и безопасную эксплуатацию прибора. Сохраните руководство в надлежащем состоянии для удобного обращения.

Содержание

Важные меры предосторожности.....	5
Комплектация	6
Эксплуатация.....	7
Уход и чистка.....	8
Рекомендации по устранению неполадок	9
Технические характеристики.....	10
Условия гарантии.....	11
Гарантийный талон.....	12

Важные меры предосторожности

Перед использованием внимательно ознакомьтесь с важными мерами предосторожности, чтобы обеспечить правильную работу прибора.

- Подключайте прибор только к розетке с напряжением, соответствующим указанному в технических характеристиках.
- Не размещайте прибор рядом с источниками тепла, открытым огнём, вблизи влаги, острых или легковоспламеняющихся предметов, а также под прямыми солнечными лучами.
- Запрещается заряжать прибор во влажных помещениях, таких как, например, ванная комната, во избежание риска поражения электрическим током.
- Не погружайте прибор и его шнур питания в воду или другие жидкости.
- Не используйте острые предметы для контакта с прибором, чтобы предотвратить его повреждение.
- Не нажимайте на кнопки управления мокрыми руками и не тяните за провод адаптера с силой.
- Не нажимайте и не удерживайте кнопки слишком сильно, чтобы избежать неисправности.
- В случае возникновения дискомфорта во время использования немедленно прекратите использование прибора.
- Прибор не рекомендуется использовать людям с кожными заболеваниями, открытыми ранами, отёками или воспалениями, сердечно-сосудистыми заболеваниями, заболеваниями крови, остеопорозом, заболеваниями мягких тканей, перенёсшим инсульт, а также тем, кто использует электронные медицинские приборы, такие как кардиостимуляторы и слуховые аппараты.

- Людям с травмами или переломами, женщинам во время менструации и беременным рекомендуется проконсультироваться с врачом перед использованием прибора.
- Не используйте прибор одновременно с другим медицинским оборудованием.
- Устройство и его аксессуары не являются игрушками. Не позволяйте детям играть с ними, поскольку это может привести к травмам, как самих детей, так и окружающих, а также к повреждению вашего устройства. Храните устройство, а также все его части и аксессуары, в недоступном для маленьких детей месте.
- Прибор не предназначен для использования детьми и лицами с физическими или умственными ограничениями без присмотра взрослых.
- Используйте только те аксессуары, которые входят в комплект поставки, включая USB-кабель. Использование сторонних USB-кабелей может привести к повреждению прибора.
- Всегда выключайте прибор после использования.
- Не используйте изделие вблизи коротковолновых или микроволновых устройств.
- Используйте прибор только по назначению, описанному в данном руководстве.
- Не используйте устройство на открытом воздухе. Прибор предназначен только для домашнего использования.
- Не кладите на изделие тяжёлые предметы.
- Не пытайтесь ремонтировать или демонтировать прибор самостоятельно.
- Не засыпайте во время работы устройства.
- Избегайте использования прибора в состоянии алкогольного опьянения.

Комплектация


Индикатор
режимов




Зарядный
провод



Кнопка
питания

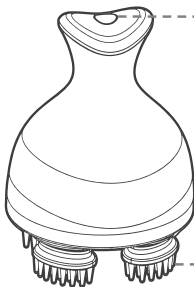

Массажная
головка

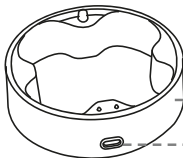

Зарядная
станция

Разъём
для зарядки

Эксплуатация

Перед первым использованием:

- Обязательно снимите все наклейки и упаковочные материалы с прибора.
- Полностью зарядите прибор. Зарядка занимает около 3 часов. Во время зарядки индикатор будет мигать, а после полной зарядки — гореть постоянно.
- Нажмите и удерживайте кнопку питания, чтобы включить или выключить прибор.
- Прибор по умолчанию включается в быстром режиме.
- Кратковременно нажмите кнопку питания, чтобы переключить режим с быстрого на медленный.
- Расположите прибор по направлению к голове, как показано на рисунке ниже.

Обратите внимание:

- Прибор автоматически выключится при низком заряде батареи или через 10 минут непрерывной работы. С полностью заряженной батареей прибор можно использовать примерно 18 раз.
- Прибор имеет степень защиты IPX7. Массажёр можно использовать во время принятия душа, но не рекомендуется длительное время погружать прибор в воду или другие жидкости.
- Индикатор будет мигать в зависимости от выбранного режима работы.



- Кожа головы: приложите прибор к коже головы и перемещайте его, чтобы массировать всю поверхность головы.



- Задняя часть шеи: приложите прибор к задней части шеи и плавно перемещайте его круговыми движениями для снятия напряжения.



- Лоб: приложите прибор ко лбу и плавно перемещайте его круговыми движениями для массажа лба.

Уход и чистка

- Перед очисткой обязательно выключите прибор.
- Протрите устройство сухой мягкой тканью для очистки загрязнений.
- Не допускайте контакта прибора с бензином, растворителями или любыми другими агрессивными веществами.
- Не погружайте устройство в воду или другие жидкости.
- Когда вы не пользуетесь прибором, храните его в сухом и прохладном месте, защищённом от прямых солнечных лучей.
- Чтобы предотвратить повреждения, рекомендуется хранить прибор в оригинальной упаковке.

При возникновении проблем с массажёром оставьте заявку в сервисный центр.



Рекомендации по устранению неполадок

Неисправность	Причины	Устранение
1. Прибор не включается. 2. Слабая интенсивность массажа.	Низкий заряд батареи.	Зарядите устройство.
Прибор не заряжается.	1. Зарядный шнур плохо подключён. 2. неподходящий зарядный провод. 3. Адаптер питания/ зарядный провод не работает.	1. Правильно подсоедините зарядный провод. 2. Используйте оригинальный зарядный провод. 3. Замените зарядный провод на новый.
Во время работы появляется дым или необычный запах.	Прибор неисправен.	Немедленно прекратите использование и отправьте его в авторизованный сервисный центр.

Технические характеристики

Наименование: Массажёр для головы торговой марки «Rebodi»

Модель: Rebodi H01

Номинальное напряжение: 5 В

Номинальная мощность: 5 Вт

Время работы: не более 15 минут

Ёмкость аккумулятора: 1100 мА·ч

Срок службы аккумулятора: до 300 циклов зарядки

Тип разъёма: USB Type-C

Вес прибора: 0,3 кг

Вес с упаковкой: 0,4 кг

Габариты массажёра (Ш × В × Д): 100 x 100 x 145 мм

Адрес места производства: Building 1, No.30, QinFu Road, LiuYue South Community, HengGang Street, LongGang District, ShenZhen, China
Билдинг 1, № 30, Цинфу Роуд, Лиуюэ Саус Комьюнити, Хэнган Стрит, Лонган Дистрикт, Шэньчжэнь, Китай

Изготовитель: «Shenzhen Forrest Health Technology Co.,LTD»

Тел.: +86 139 2741 5158, sales1@forrestmassager.com

Дата производства: см. стикер на корпусе прибора

Импортер: ООО «МаксТрейд», 188663, РФ, Ленинградская обл.,
Всеволожский р-н, г. п. Кузьмоловский, ул. Заводская, д. 3, корп. 361 А,
пом. 182, тел. +7 (931) 337-6057, chilikin.maxx@gmail.com

Условия гарантии

Гарантия предоставляется владельцу массажёра Rebodi. На устройство распространяется гарантийный срок в течение 1 (одного) года для домашнего использования. Если во время использования массажёра в нормальных условиях были обнаружены дефекты, фирма, согласно фактической дате получения письменного уведомления о дефектах в течение гарантийного периода, несёт ответственность за замену или ремонт устройства.

Данная гарантия не распространяется на повреждения в результате:

- Неправильного использования устройства, несоблюдения инструкций по эксплуатации;
- Использования принадлежностей, не поставляемых производителем или уполномоченным изготовителем;
- Ремонта или технического обслуживания в неуполномоченной компанией Rebodi ремонтной организации;
- Повреждений, которые не были вызваны производителем, в том числе повреждений при транспортировке;
- Несчастного случая, злоупотребления, порчи, неправильного обращения с устройством;
- Внесения несогласованных с производителем изменений в конструкцию.

Приобретайте официально поставляемую продукцию Rebodi – то есть ту, которая была предназначена Rebodi для реализации на территории Российской Федерации и официально ввезена в Россию уполномоченным импортёром. Официально поставляемая продукция комплектуется руководством по эксплуатации на русском языке, маркируется уникальным серийным номером с кодом импортёра, а также поддерживается электронной гарантией изготовителя по серийному номеру. При нелегальном ввозе продукции на территорию Российской Федерации нарушаются нормы таможенного законодательства и законодательства о защите прав интеллектуальной собственности. Авторизованные сервисные центры Rebodi не осуществляют бесплатную гарантийную поддержку продукции Rebodi, нелегально ввезённой в Россию.

Вы имеете право на гарантийное обслуживание только в тех авторизованных сервис-центрах, контактная информация которых указана в данном гарантийном талоне. Чтобы удостовериться, что изделие Rebodi предназначено для продажи на российском рынке и поддерживается гарантией Rebodi в указанных в данном гарантийном талоне сервисных центрах, вы можете проверить его серийный номер и получить соответствующее подтверждение от сервис-центра.

Гарантийный талон

Контактная информация авторизованного сервис-центра:

Компания «Maxmassage».

Адреса авторизованных сервисных центров в Москве и Санкт-Петербурге уточняйте на сайте maxmassage.ru/remont по телефону +7 (800) 222-32-11 (звонок бесплатный) или по электронной почте remont@maxmassage.ru

Быстро и удобно оставить заявку на ремонт можно через форму:

maxmassage.ru/remont

Для ускорения гарантийного обслуживания направьте заявку на диагностику и ремонт с подробным описанием дефекта устройства, приложенными фото или видео, отражающими суть проблемы. В письме укажите свои контактные данные, дату покупки, наименование фирмы-продавца и серийный № устройства.

Модель: Rebodi H01

Серийный номер (Serial no): _____

Фирма-продавец: _____

Дата продажи: _____

С условиями гарантии ознакомлен и согласен _____

(подпись покупателя)



Товар сертифицирован. Установленный производителем в соответствии с п. 2 ст. 5 Закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы данного изделия равен гарантийному сроку с даты продажи при условии, что изделие используется согласно правилам и рекомендациям, изложенным в настоящем руководстве по эксплуатации, и применяемым техническим стандартам. Информацию о соответствии можно найти по адресу: www.maxmassage.ru



Представительство в России:
Группа компаний «Maxmassage»
info@maxmassage.ru
Тел: 8 (800) 3333-627

maxmassage.ru