



Массажный мат
Rebodi M01



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Благодарим вас за покупку! Перед использованием устройства внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации и сохраните её вместе с гарантийным талоном для дальнейшего использования в качестве справочного материала.

Содержание

Важные меры предосторожности.....	5
Комплектация и эксплуатация.....	8
Панель управления	10
Обслуживание и уход.....	10
Рекомендации по устранению неполадок	11
Технические характеристики.....	12
Условия гарантии.....	13
Гарантийный талон.....	14



Важные меры предосторожности

Перед использованием внимательно ознакомьтесь с важными мерами предосторожности, чтобы обеспечить правильную работу прибора.

1. Используйте прибор только по назначению, как описано в данном руководстве.
2. Прибор должен подключаться только к источнику питания с безопасным напряжением, соответствующим маркировке на приборе.
3. Используйте прибор только по назначению, описанному в данном руководстве.
4. Прибор предназначен только для домашнего использования и не предназначен для коммерческого или медицинского применения. Если у вас есть какие-либо проблемы со здоровьем, проконсультируйтесь с врачом перед использованием данного прибора.
5. Не используйте устройство на открытом воздухе или во влажных помещениях (например, в ванной или душе).
6. Не используйте прибор одновременно с другим медицинским оборудованием.
7. Всегда выключайте прибор после использования.
8. Не используйте прибор под одеялом или подушкой. Это может привести к перегреву, возгоранию, поражению электрическим током или травмам.
9. Никогда не используйте прибор с заблокированными вентиляционными отверстиями. Следите за тем, чтобы вентиляционные отверстия не были засорены ворсом, волосами и т.п.
10. Не роняйте и не вставляйте какие-либо предметы в отверстия прибора.
11. Не используйте острые предметы для контакта с прибором, чтобы предотвратить его повреждение.
12. Не используйте прибор в местах, где применяются аэрозольные (распыляемые) продукты или подаётся кислород.
13. Обязательно вынимайте вилку из розетки, если прибор не используется.

14. Не вынимайте вилку мокрыми руками. Это может привести к поражению электрическим током и травмам.
15. Не переносите прибор за шнур питания и не используйте шнур в качестве ручки.
16. Отключайте прибор от розетки после отключения электроэнергии. В противном случае это может привести к поражению электрическим током, короткому замыканию и возгоранию.
17. Прибор следует использовать только с блоком питания, поставляемым в комплекте с прибором. Использование сторонних USB-кабелей может привести к повреждению прибора.
18. Не размещайте прибор рядом с источниками тепла, открытым огнём, вблизи влаги, острых или легковоспламеняющихся предметов, а также под прямыми солнечными лучами.
19. Этот прибор может использоваться детьми в возрасте от 8 лет и старше, а также лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями или с недостатком опыта и знаний, только при условии, что они находятся под присмотром или получили инструкцию по безопасному использованию прибора и понимают связанные с этим опасности. Детям запрещается играть с прибором.
20. Не засыпайте во время работы устройства.
21. Избегайте использования прибора в состоянии алкогольного опьянения.
22. Никогда не используйте прибор, если у него повреждён шнур или вилка, если он работает неправильно, если он падал, был повреждён или упал в воду. Во избежание несчастных случаев и травм не ремонтируйте прибор самостоятельно. Свяжитесь с сервисным центром для проверки.
23. Обратите особое внимание на запчасти, наиболее подверженные износу. Рекомендуется немедленно заменять дефектные компоненты и/или не использовать прибор до завершения ремонта.
24. Максимальное время работы не может превышать 60 минут за один раз. Для возобновления работы после 60 минут использования необходим перерыв в 30 минут.

Важно

При возникновении каких-либо необычных ощущений во время использования прибора, немедленно прекратите использование и обратитесь к врачу. В противном случае это может нанести вред вашему здоровью.

Прибор не рекомендуется использовать людям с:


- кардиостимуляторами и другими имплантируемыми медицинскими электронными приборами;
 - низкой чувствительностью к высоким температурам;
 - злокачественными опухолями;
 - заболеваниями сердца;
 - беременностью или в состоянии послеродового периода;
 - деформациями позвоночника;
 - нарушениями восприятия, вызванными высокой степенью нарушения периферического кровообращения при диабете;
 - шрамами на коже;
 - плохим самочувствием;
 - остеопорозом, серьёзными переломами, растяжениями и мышечными болями, а также при острой головной боли;
 - температурой тела 38°C и выше;
 - тендинитом;
 - острыми воспалительными симптомами, усталостью, ознобом, изменениями артериального давления и т. п.;
- а также другим лицам, находящимся на лечении в медицинских учреждениях.

Комплектация и эксплуатация

Комплектация



Зоны массажа

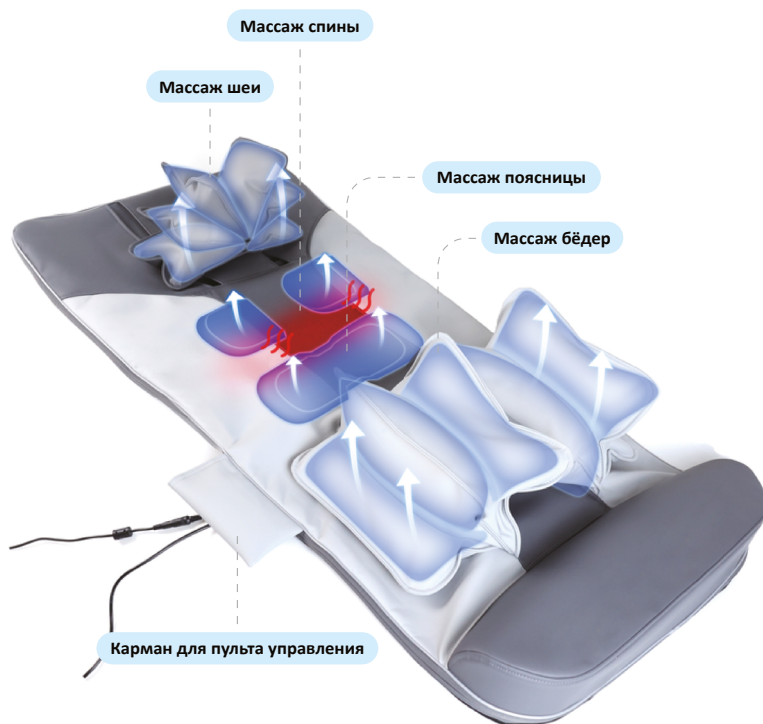

Эксплуатация


При включении питания прибор находится в режиме ожидания, и активна только кнопка Вкл/Выкл. В рабочем состоянии все кнопки активны, и при нажатии на активную кнопку загорается соответствующий светодиодный индикатор (LED). Каждое нажатие активной кнопки сопровождается звуковым сигналом. При переключении режима интенсивность по умолчанию устанавливается на второй уровень.

1 Кнопка «Вкл/Выкл». В режиме ожидания нажмите и удерживайте эту кнопку в течение 2 секунд, чтобы включить прибор. Загорятся все светодиодные индикаторы, установится время работы по умолчанию (20 минут), включится автоматическая программа и установится интенсивность по умолчанию (второй уровень). В любом рабочем состоянии кратковременно нажмите на эту кнопку, чтобы выключить прибор.

2 Кнопка «Авто». В рабочем состоянии первое нажатие этой кнопки включает автоматический режим. Второе нажатие этой кнопки отключает автоматический режим.

Кнопка «Растяжка». В рабочем состоянии первое нажатие этой кнопки включает режим растягивания. Второе нажатие этой кнопки отключает режим.

Кнопка «Охват». В рабочем состоянии первое нажатие этой кнопки включает режим «охват». Второе нажатие этой кнопки отключает режим.

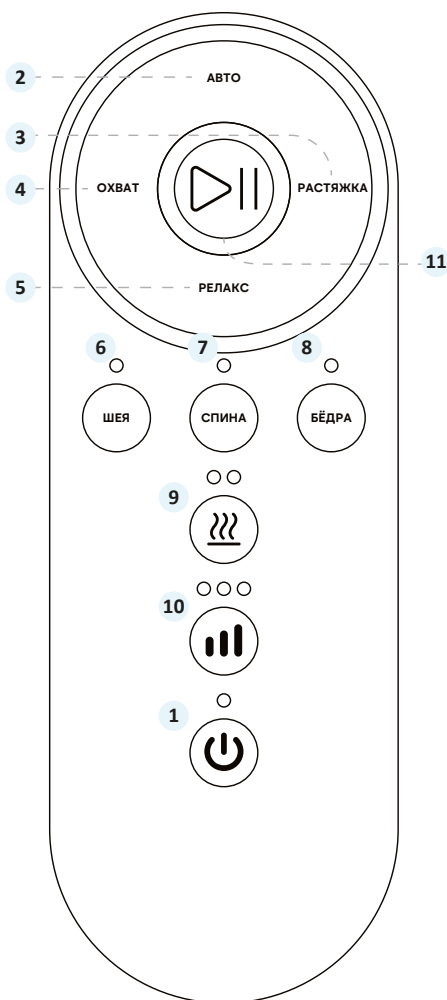

Панель управления

- 5 **Кнопка «Релакс».** В рабочем состоянии первое нажатие этой кнопки включает режим расслабления. Второе нажатие этой кнопки отключает режим расслабления.
- 6 **Кнопка «Шея».** В режиме ожидания нажмите эту кнопку, чтобы включить массаж зоны шеи. Повторное нажатие отключает этот режим.
- 7 **Кнопка «Спина».** В режиме ожидания нажмите эту кнопку, чтобы включить режим массажа спины. Повторное нажатие отключает этот режим.
- 8 **Кнопка «Бёдра».** В режиме ожидания нажмите эту кнопку, чтобы включить режим. Повторное нажатие отключает этот режим.
- 9 **Кнопка «Подогрев».** Нажмите эту кнопку, чтобы переключать уровень нагрева в следующей последовательности: 1 уровень (40 градусов) → 2 уровень (45 градусов) → 1 уровень → 2 уровень (циклически).
- 10 **Кнопка «Интенсивность»** Во время массажа нажмите эту кнопку, чтобы переключать интенсивность в следующей последовательности: 2 уровень → 3 уровень → 1 уровень → 2 уровень (циклически).
- 11 **Кнопка «Старт/Пауза».** Нажмите кнопку, чтобы приостановить работу. Повторно нажмите кнопку, чтобы возобновить работу.

Обслуживание и уход

Перед очисткой убедитесь, что питание выключено и вилка вытащена из розетки.


Протрите пульт управления мягкой сухой тканью. Для очистки поверхности прибора используйте ткань, смоченную моющим средством, а затем протрите сухой тканью.

- Не допускайте контакта прибора с бензином, растворителями или любыми другими агрессивными веществами.
- Не погружайте устройство в воду или другие жидкости.
- Когда вы не пользуетесь прибором, храните его в сухом и прохладном месте, защищённом от прямых солнечных лучей.

Важно

Не стирать и не подвергать химической чистке!

Как сложить мат

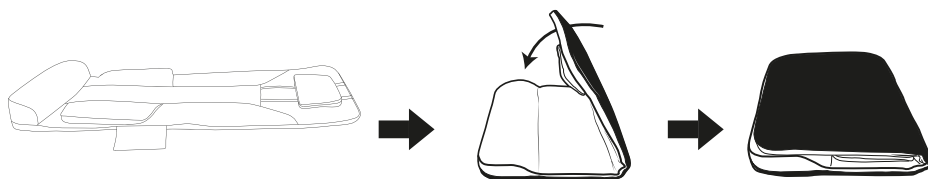

Рекомендации по устранению неполадок

№	Неисправность	Устранение
1	Аппарат не работает.	1. Вилка отключена от сети. Подключите вилку к розетке. 2. Питание выключено. Включите аппарат. 3. Проверьте выбранный режим. Выберите ручной/авторегим.
2	Накачка воздуха прекратилась.	1. Питание выключено. Включите аппарат. 2. Время массажа истекло. Выберите время и режим заново.

При возникновении проблем с массажёром оставьте заявку в сервисный центр.



Технические характеристики

Наименование: Массажный мат торговой марки «Rebodi»

Модель: Rebodi M01

Входное напряжение: 220-240 В / ~50-60 Гц

Выходное напряжение: 12 В / 2,5 А

Номинальная мощность: 30 Вт

Вес прибора: 5,1 кг

Вес с упаковкой: 5,4 кг

Габариты прибора (Ш × В × Д): 120 × 60 × 9 см

Рекомендуемое время непрерывной работы: не более 60 минут

Адрес места производства: 4F, No. 1019, Wanjiachun Road, Torch High-Technic Zone (Xiang'an) Industrial Park, Xiamen, China (4Ф, №. 1019, Ванцзячунь Роуд, Торч Хай-Техник Зон (Сяннань) Индастриал Парк, Сямэнь, Китай).

Изготовитель: «Xiamen Healthpal Electronic Co., Ltd»

Тел.: 0592-5326750, sales@xmhealthcare.com

Дата производства: см. стикер на корпусе прибора

Импортер: ООО «МаксТрейд», 188663, РФ, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г. п. Кузьмоловский, ул. Заводская, д. 3, корп. 361А, пом. 182.

Тел.: +7 (931) 337-6057, chilikin.maxx@gmail.com

Условия хранения, транспортировки, реализации и утилизации:

- Изделие не требует какого-либо монтажа или дополнительной фиксации.
- Хранение и транспортировка изделия должны производиться в сухом помещении. Изделие требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т. д.
- Реализация изделия должна производиться в соответствии с действующим законодательством РФ.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приёма электрического и электронного оборудования.

Условия гарантии

Гарантия предоставляется владельцу массажёра Rebodi. На устройство распространяется гарантийный срок в течение 2 (двух) лет для домашнего использования. Если во время использования массажёра в нормальных условиях были обнаружены дефекты, фирма, согласно фактической дате получения письменного уведомления о дефектах в течение гарантийного периода, несёт ответственность за замену или ремонт устройства.

Данная гарантия не распространяется на повреждения в результате:

- Неправильного использования устройства, несоблюдения инструкций по эксплуатации;
- Использования принадлежностей, не поставляемых производителем или уполномоченным изготовителем;
- Ремонта или технического обслуживания в неуполномоченной компанией Rebodi ремонтной организации;
- Повреждений, которые не были вызваны производителем, в том числе повреждений при транспортировке;
- Несчастного случая, злоупотребления, порчи, неправильного обращения с устройством;
- Внесения несогласованных с производителем изменений в конструкцию.

Приобретайте официально поставляемую продукцию Rebodi – то есть ту, которая была предназначена Rebodi для реализации на территории Российской Федерации и официально ввезена в Россию уполномоченным импортёром. Официально поставляемая продукция комплектуется руководством по эксплуатации на русском языке, маркируется уникальным серийным номером с кодом импортёра, а также поддерживается электронной гарантией изготовителя по серийному номеру. При нелегальном ввозе продукции на территорию Российской Федерации нарушаются нормы таможенного законодательства и законодательства о защите прав интеллектуальной собственности. Авторизованные сервисные центры Rebodi не осуществляют бесплатную гарантийную поддержку продукции Rebodi, нелегально ввезённой в Россию.

Вы имеете право на гарантийное обслуживание только в тех авторизованных сервис-центрах, контактная информация которых указана в данном гарантийном талоне. Чтобы удостовериться, что изделие Rebodi предназначено для продажи на российском рынке и поддерживается гарантией Rebodi в указанных в данном гарантийном талоне сервисных центрах, вы можете проверить его серийный номер и получить соответствующее подтверждение от сервис-центра.

Гарантийный талон

Контактная информация авторизованного сервис-центра:

Компания «Maxmassage».

Адреса авторизованных сервисных центров в Москве и Санкт-Петербурге уточняйте на сайте maxmassage.ru/remont по телефону +7 (800) 222-32-11 (звонок бесплатный) или по электронной почте remont@maxmassage.ru

Быстро и удобно оставить заявку на ремонт можно через форму:

maxmassage.ru/remont

Для ускорения гарантийного обслуживания направьте заявку на диагностику и ремонт с подробным описанием дефекта устройства, приложенными фото или видео, отражающими суть проблемы. В письме укажите свои контактные данные, дату покупки, наименование фирмы-продавца и серийный № устройства.

Модель: Rebodi M01

Серийный номер (Serial no): _____

Фирма-продавец: _____

Дата продажи: _____

С условиями гарантии ознакомлен и согласен _____

(подпись покупателя)



Товар сертифицирован. Установленный производителем в соответствии с п. 2 ст. 5 Закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы данного изделия равен гарантийному сроку с даты продажи при условии, что изделие используется согласно правилам и рекомендациям, изложенным в настоящем руководстве по эксплуатации, и применяемым техническим стандартам. Информацию о соответствии можно найти по адресу: www.maxmassage.ru





Представительство в России:
Группа компаний «Maxmassage»
info@maxmassage.ru
Тел: 8 (800) 3333-627

maxmassage.ru