



Массажёр для рук Rebodi A02



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Благодарим вас за покупку! Перед использованием устройства внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации и сохраните её вместе с гарантийным талоном для дальнейшего использования в качестве справочного материала.

Содержание

Важные меры предосторожности	4
Комплектация	6
Начало работы и эксплуатация.....	6
Действие режимов	9
Обслуживание и уход.....	10
Аккумулятор	11
Рекомендации по устранению неполадок	11
Технические характеристики	12
Условия гарантии	13
Гарантийный талон.....	14

Важные меры предосторожности

- Используйте прибор только по назначению, описанному в данном руководстве.
- Прибор должен подключаться только к источнику питания с безопасным напряжением, соответствующим маркировке на приборе.
- Массажёр предназначен только для домашнего использования и не предназначен для коммерческого или медицинского применения. Если у вас есть какие-либо проблемы со здоровьем, проконсультируйтесь с врачом перед использованием данного прибора.
- Устройство имеет нагреваемую поверхность. Лицам с пониженной чувствительностью к теплу следует соблюдать осторожность при использовании.
- Этот прибор может использоваться детьми в возрасте от 8 лет и старше, а также лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями или с недостатком опыта и знаний, только при условии, что они находятся под присмотром или получили инструкцию по безопасному использованию прибора и понимают связанные с этим опасности. Детям запрещается играть с прибором.
- Не используйте устройство в условиях повышенной влажности, например, в ванной комнате.
- Не включайте устройство сразу после резкого изменения температуры окружающей среды. Дайте ему нагреться/охладиться до комнатной температуры.
- Запрещается использовать устройство во время вождения или ходьбы.
- Не используйте устройство в состоянии алкогольного опьянения или при плохом самочувствии.
- Не засыпайте во время работы устройства.
- В случае поломки устройства не прикасайтесь к его внутренним компонентам во избежание поражения электрическим током. Не используйте прибор, если он работает неправильно, если он падал, был повреждён или упал в воду. Во избежание несчастных случаев и травм не ремонтируйте прибор самостоятельно. Свяжитесь с сервисным центром для проверки.
- Не вносите изменения в конструкцию адаптера/шнура.
- Никогда не оставляйте включённое устройство без присмотра. Обязательно выключайте его после каждого использования.
- Не тяните за шнур при отключении адаптера от сети. Подключайте и отключайте вилку аккуратно.
- Устройство не предназначено для мытья. Не погружайте его в воду и не промывайте под проточной водой.
- Батареи в данном устройстве не подлежат замене.
- Не допускайте попадания жидкости на устройство.
- Не подключайте и не отключайте устройство мокрыми руками.

- Не используйте устройство непрерывно более 30 минут.
- Во время работы ничем не накрывайте ручной массажёр. Это может привести к перегреву и неисправности устройства.
- Немедленно прекратите использование устройства при возникновении любых необычных ощущений или сбоев в работе.
- Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать устройство. В случае неисправности обратитесь в сервисный центр.

Перед использованием устройства проконсультируйтесь с врачом в следующих случаях:

- При инфекционных заболеваниях кожи;
- При остеопорозе;
- При сердечно-сосудистых заболеваниях;
- При установленных активных медицинских имплантатах, таких как кардиостимуляторы;
- При повышенной температуре тела;
- При беременности или менструации;
- При недомогании, например, воспалении, застое крови в конечностях;
- При недавно перенесённой операции на руках.

Детям младше 8 лет и лицам с ограниченными физическими, сенсорными и/или умственными способностями, также следует проконсультироваться с врачом перед использованием.

Комплектация

Массажёр для рук



Кабель
для зарядки



Инструкция



Начало работы и эксплуатация


Перед первым включением полностью зарядите массажёр. Для зарядки аккумулятора используйте только стандартный блок питания USB-A с напряжением 5 В / 2 А (не входит в комплект поставки, используйте любой совместимый блок питания для ваших мобильных устройств).

Не используйте массажёр во время зарядки.


Зарядка:

- В процессе зарядки индикатор батареи мигает. При полной зарядке индикатор батареи горит постоянно.
- Время полной зарядки составляет 2,5 часа.
- После полной зарядки устройство можно использовать до 90 минут с включённой функцией подогрева и до 120 минут с выключенной функцией подогрева.

Панель управления

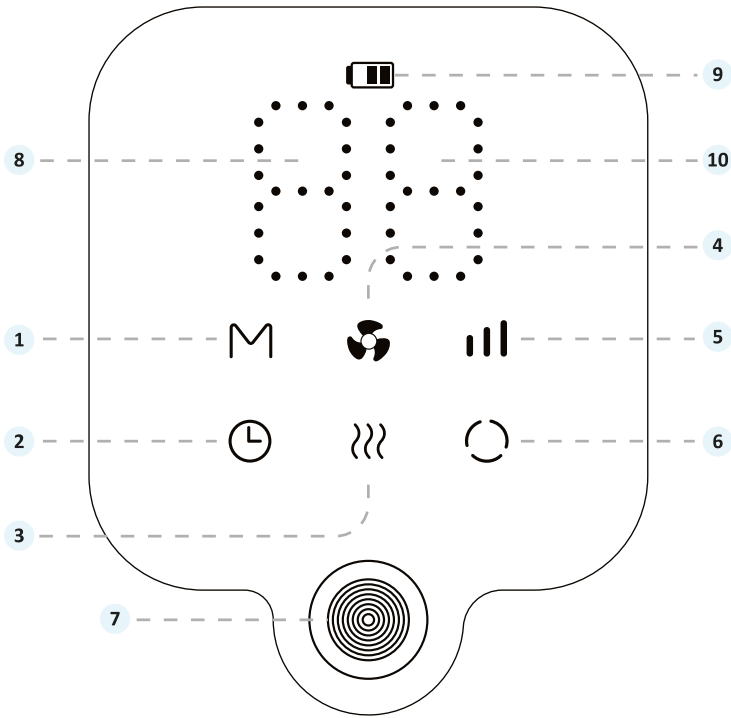

- 1 Кнопка «Выбор режима»
- 2 Кнопка «Таймер»
- 3 Кнопка «Подогрев»
- 4 Кнопка «Охлаждение»
- 5 Кнопка «Интенсивность»
- 6 Кнопка «Разминание»
- 7 Кнопка «Вкл/Выкл»
- 8 Индикатор уровня интенсивности
- 9 Индикатор уровня заряда батареи
- 10 Индикатор выбранного режима
- 11 Предохранительный воздушный клапан

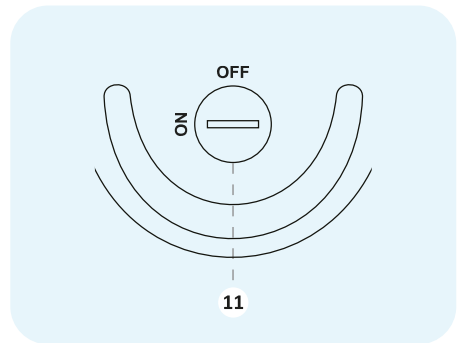

Описание кнопок:

Кнопка «Выбор режима»:

Устройство имеет 6 режимов массажа. Нажимайте кнопку для выбора нужного режима. Индикаторы 1, 2, 3, 4, 5, 6 соответствуют режимам 1, 2, 3, 4, 5, 6 соответственно.

(При нажатии кнопки режима на дисплее отображается только номер режима, а индикатор уровня интенсивности пропадает на 2 секунды).

Кнопка «Интенсивность»:

Массажёр имеет 6 уровней интенсивности: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Нажимайте кнопку, чтобы увеличить или уменьшить интенсивность массажа.

(При нажатии кнопки уровня интенсивности на дисплее отображается только уровень интенсивности, а индикатор режима пропадает на 2 секунды).

Кнопка «Охлаждение»:

Устройство оснащено встроенным вентилятором. Нажмите кнопку охлаждения, чтобы включить функцию обдува.

Кнопка «Подогрев»:

Нажмите кнопку подогрева для выбора уровня нагрева: Слабый, Сильный, Без подогрева.

Кнопка «Таймер»:

Три предустановленных значения таймера: 10, 15 и 20 минут. Нажимайте кнопку таймера для выбора желаемой продолжительности работы. По истечении установленного времени массажёр автоматически выключится.

Кнопка «Разминание»:

Короткое нажатие включает функцию разминающего массажа. Зелёный индикатор указывает на направление разминания по часовой стрелке, синий – против часовой стрелки.

Кнопка «Вкл/Выкл»:


Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 2 секунд для включения устройства. Короткое нажатие кнопки питания приостанавливает работу массажёра, повторное короткое нажатие возобновляет работу.

Предохранительный воздушный клапан:


В случае, если воздушные подушки устройства не сдуваются обычным способом, откройте предохранительный воздушный клапан для экстренного выпуска воздуха.

Действие режимов


Автоматический массаж

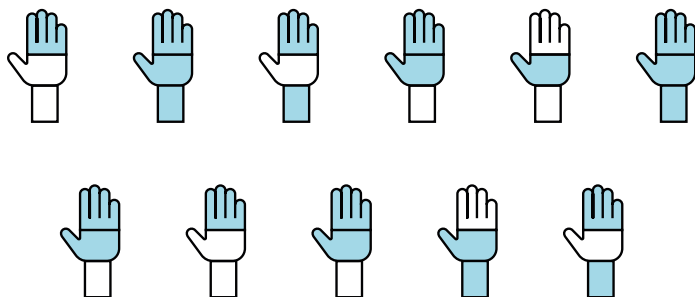


Круговой массаж

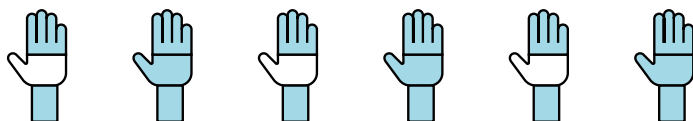


Успокаивающий массаж

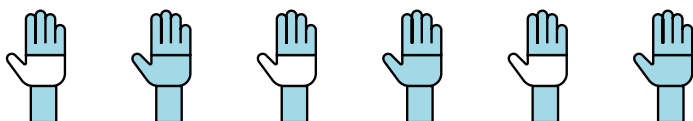


Расслабляющий массаж

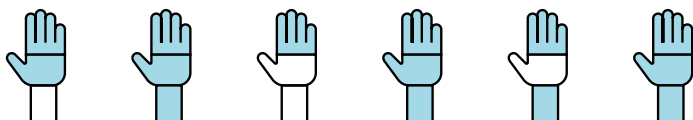

Массаж руки

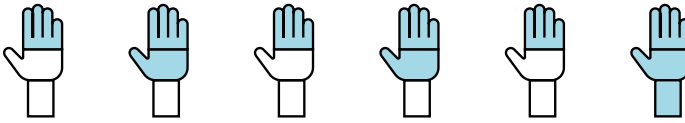

Массаж ладони и запястья

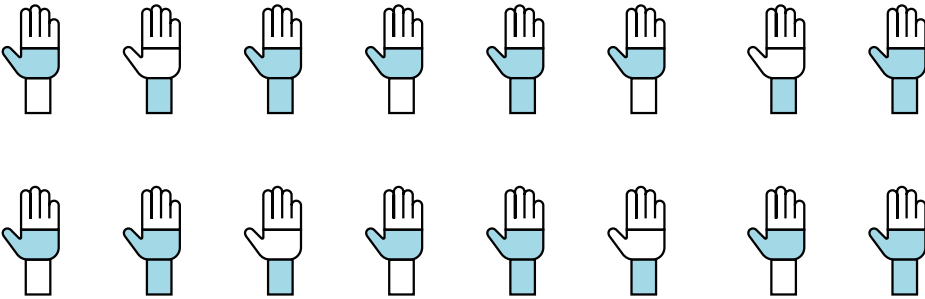

Обслуживание и уход

- Перед очищением устройства всегда отключайте прибор от электросети. Дайте прибору полностью остыть, прежде чем приступить к очистке.
- Слегка смочите мягкую ткань в воде или в растворе нейтрального моющего средства (3–5%).
- Аккуратно протрите загрязнённые участки корпуса влажной тканью. Запрещается использовать для чистки острые щётки, металлические инструменты, агрессивные вещества.
- Не допускайте попадания влаги на панель управления, так как это может вызвать её поломку. Для очистки панели управления используйте только сухую мягкую ткань.
- Не погружайте прибор или его части в воду или другие жидкости. Дождитесь полного высыхания прибора перед повторным использованием.
- Храните прибор в коробке, в безопасном сухом и прохладном месте, защищённом от прямых солнечных лучей.
- Избегайте хранения прибора вблизи источников тепла, открытого огня или под прямыми солнечными лучами, так как это может привести к его выцветанию или повреждению.

Аккумулятор

1. Для зарядки аккумулятора используйте только стандартный блок питания USB-A с напряжением 5 В / 2 А (не входит в комплект поставки, используйте любой совместимый блок питания для ваших мобильных устройств).
2. В данном устройстве используются батареи, которые не подлежат замене.
3. Перед утилизацией устройства необходимо извлечь аккумулятор.

Рекомендации по устранению неполадок

Неисправность	Устранение
Аппарат не запускается	Низкий заряд батареи. Зарядите устройство.
Работа резко остановилась	1. Аккумулятор разряжен. Зарядите его; 2. Истекло время работы устройства (10, 15 или 20 минут). Перезапустите устройство.
Воздушные камеры не сжимаются/не надуваются	Проверьте, чтобы переключатель клапана на задней панели массажёра был выключен.

При возникновении проблем с массажем оставьте заявку в сервисный центр.



Технические характеристики

Наименование: Массажёр для рук торговой марки «Rebodi»

Модель: Rebodi A02

Входное напряжение: 220-240 В / ~50-60 Гц

Выходное напряжение: 5 В / 2 А

Номинальная мощность: 10 Вт

Таймер: 10/15/20 минут

Ёмкость аккумулятора: 3000 мАч

Вес прибора: 1,2 кг

Вес с упаковкой: 1,93 кг

Габариты массажёра (Ш × В × Д): 273 x 170 x 129 мм

Адрес места производства: 4F, No. 1019, Wanjiachun Road, Torch High-Tech Zone (Xiang'an) Industrial Park, Xiamen, China (4Ф, №. 1019, Ванцзячунь Роуд, Торч Хай-Текник Зон (Сянань) Индастриал Парк, Сямэнь, Китай).

Изготовитель: «Xiamen Healthpal Electronic Co., Ltd»

Тел.: 0592-5326750, sales@xmhealthcare.com

Дата производства: см. стикер на корпусе прибора

Импортер: ООО «МакТрейд», 188663, РФ, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г. п. Кузьмолровский, ул. Заводская, д. 3, корп. 361 А, пом. 182.

Тел.: +7 (931) 337-6057, chilikin.maxx@gmail.com

Условия хранения, транспортировки, реализации и утилизации:

- Изделие не требует какого-либо монтажа или дополнительной фиксации.
- Хранение и транспортировка изделия должны производиться в сухом помещении. Изделие требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т. д.
- Реализация изделия должна производиться в соответствии с действующим законодательством РФ.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приёма электрического и электронного оборудования.

Условия гарантии

Гарантия предоставляется владельцу массажёра Rebodi. На устройство распространяется гарантийный срок в течение 1 (одного) года для домашнего использования. Если во время использования массажёра в нормальных условиях были обнаружены дефекты, фирма, согласно фактической дате получения письменного уведомления о дефектах в течение гарантийного периода, несёт ответственность за замену или ремонт устройства.

Данная гарантия не распространяется на повреждения в результате:

1. Неправильного использования устройства, несоблюдения инструкций по эксплуатации;
2. Использования принадлежностей, не поставляемых производителем или уполномоченным изготовителем;
3. Ремонта или технического обслуживания в неуполномоченной компанией Rebodi ремонтной организации;
4. Повреждений, которые не были вызваны производителем, в том числе повреждений при транспортировке;
5. Несчастного случая, злоупотребления, порчи, неправильного обращения с устройством;
6. Внесения несогласованных с производителем изменений в конструкцию.

Приобретайте официально поставляемую продукцию Rebodi – то есть ту, которая была предназначена Rebodi для реализации на территории Российской Федерации и официально ввезена в Россию уполномоченным импортёром. Официально поставляемая продукция комплектуется руководством по эксплуатации на русском языке, маркируется уникальным серийным номером с кодом импортёра, а также поддерживается электронной гарантией изготовителя по серийному номеру. При нелегальном ввозе продукции на территорию Российской Федерации нарушаются нормы таможенного законодательства и законодательства о защите прав интеллектуальной собственности. Авторизованные сервисные центры Rebodi не осуществляют бесплатную гарантийную поддержку продукции Rebodi, нелегально ввезённой в Россию.

Вы имеете право на гарантийное обслуживание только в тех авторизованных сервис-центрах, контактная информация которых указана в данном гарантийном талоне. Чтобы удостовериться, что изделие предназначено для продажи на российском рынке и поддерживается гарантией Rebodi в указанных в данном гарантийном талоне сервисных центрах, вы можете проверить его серийный номер и получить соответствующее подтверждение от сервис-центра.

Гарантийный талон

Контактная информация авторизованного сервис-центра:

Компания «Maxmassage»

Адреса авторизованных сервисных центров в Москве и Санкт-Петербурге уточняйте на сайте maxmassage.ru/remont по телефону +7 (800) 222-32-11 (звонок бесплатный) или по электронной почте remont@maxmassage.ru

Быстро и удобно оставить заявку на ремонт можно через форму:
maxmassage.ru/remont

Для ускорения гарантийного обслуживания направьте заявку на диагностику и ремонт с подробным описанием дефекта устройства, приложенными фото или видео, отражающими суть проблемы. В письме укажите свои контактные данные, дату покупки, наименование фирмы-продавца и серийный № устройства.

Модель: Rebodi A02

Серийный номер (Serial no): _____

Фирма-продавец: _____

Дата продажи: _____

С условиями гарантии ознакомлен и согласен _____
(подпись покупателя)



Товар сертифицирован. Установленный производителем в соответствии с п. 2 ст. 5 Закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы данного изделия равен гарантийному сроку с даты продажи при условии, что изделие используется согласно правилам и рекомендациям, изложенным в настоящем руководстве по эксплуатации, и применяемым техническим стандартам. Информацию о соответствии можно найти по адресу: www.maxmassage.ru





Представительство в России:
Группа компаний «Maxmassage»
info@maxmassage.ru
Тел: 8 (800) 3333-627

maxmassage.ru