



Массажёр для рук
Rebodi A01



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Благодарим вас за покупку массажёра для рук.
Перед использованием внимательно прочтите данную инструкцию и сохраните для дальнейшей эксплуатации.
Данное изделие предназначено только для домашнего использования.

Содержание

Важные меры предосторожности.....	5
Техническое обслуживание.....	8
Устранение типичных неполадок.....	8
Подготовка к работе.....	8
Комплектация	9
Панель управления	10
Рекомендации по устранению неполадок.....	11
Технические характеристики.....	12
Условия гарантии.....	13
Гарантийный талон.....	14



Важно

Перед использованием прибора внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации и сохраните её вместе с гарантийным талоном для дальнейшего использования в качестве справочного материала.

Предупреждения

1. В целях безопасности используйте прибор только в состоянии бодрствования и ясности сознания.
2. Перед использованием снимите украшения или другие предметы, которые могут помешать эффективности массажа.
3. Запрещается заряжать прибор во влажных помещениях, таких как, например, ванная комната, во избежание риска поражения электрическим током.
4. Храните прибор вдали от источников воды, открытого огня и агрессивных веществ.
5. При использовании в особых условиях соблюдайте соответствующие правила техники безопасности.
6. Не используйте острые предметы для контакта с прибором, чтобы предотвратить его повреждение.
7. В случае возникновения дискомфорта во время использования немедленно прекратите использование прибора.
8. С осторожностью используйте функцию подогрева, если у вас пониженная чувствительность к теплу.
9. Не позволяйте маленьким детям играть с устройством и его аксессуарами, так как это может привести к травмам детей или других людей, а также к повреждению устройства. Храните устройство, все его части и аксессуары в недоступном для маленьких детей месте.

Перед использованием устройства проконсультируйтесь с врачом в следующих случаях:

- Если вы недавно перенесли хирургическое вмешательство (особенно в области, предназначенной для массажа).
- При сердечных заболеваниях, острых заболеваниях, заболеваниях кожи, анамнезе онкологических заболеваний, заболеваниях крови (например, склонности к кровотечениям), остеопорозе, проблемах с мягкими тканями, восстановлении после инсульта или других особых заболеваниях.
- При беременности или во время менструации.
- Перед использованием детям младше 12 лет необходимо получить медицинскую консультацию и находиться под присмотром взрослых.

Аппарат предназначен только для домашнего использования.

Функции

1. Компрессионное воздействие и успокаивающий нагрев.
2. Три режима массажа на выбор:
 - Тонизирующий;
 - Оздоровительный;
 - Расслабляющий.
3. Три уровня интенсивности массажа в каждом режиме.
4. Встроенный аккумулятор с возможностью подзарядки и работы от сети.
5. Удобная панель управления с кнопками.
6. Подогрев.

Комплектация

Массажёр для рук



Кабель
для зарядки



Инструкция



Сборка и эксплуатация

Перед началом работы:


Изделие нельзя использовать во время зарядки.

Перед первым включением полностью зарядите массажёр.

Зарядка:

1. Когда заряд батареи низкий, индикатор питания начнёт мигать, и массажёр автоматически выключится через 3–10 минут, в зависимости от режима работы.
2. Подключите USB-кабель к любому USB-зарядному устройству, например, к портативному аккумулятору, зарядному устройству мобильного телефона, ноутбуку или любому USB-порту.
3. Во время зарядки индикатор горит красным цветом. Когда зарядка завершена, индикатор загорится зеленым.
4. Обычно полная зарядка занимает 3–4 часа.

Особенности режимов и их применение

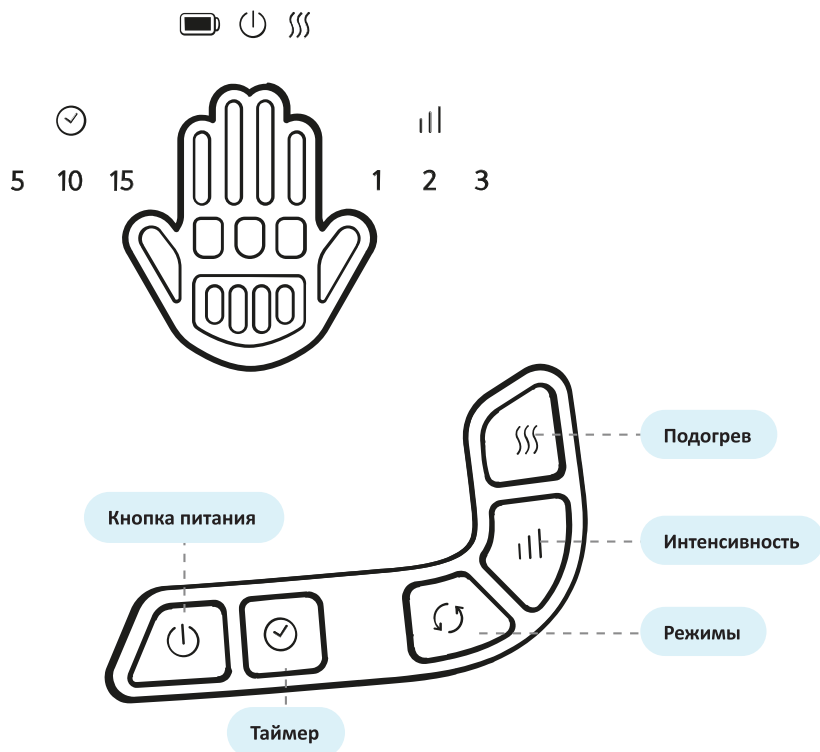

Кнопка питания

Нажмите, чтобы включить ручной массажёр. По умолчанию устройство запускается с минимальной интенсивностью и в режиме M1.

Таймер

Таймер по умолчанию установлен на 15 минут. По истечении этого времени устройство автоматически выключится. Нажмите, чтобы установить таймер на 5, 10 или 15 минут.

Подогрев

Нажмите, чтобы включить функцию подогрева. Нажмите ещё раз, чтобы выключить её.

Интенсивность

Нажмите, чтобы установить интенсивность массажа: «Низкий», «Средний» или «Высокий» уровень.

Режимы

Нажмите, чтобы переключаться между режимами массажа M1, M2 и M3. Соответствующий светодиод будет подсвечиваться.

M1: Тонизирующий массаж – равномерный массаж тыльной стороны ладони и запястья.

M2: Оздоровляющий массаж – массаж с акцентом на тыльную сторону ладони для снятия напряжения.

M3: Расслабляющий массаж – массаж запястья.




Примечание.

Инструкция по использованию клапана спуска воздуха

1. Режим по умолчанию: «OFF». В этом режиме воздушные подушки могут свободно наполняться воздухом и обеспечивать компрессию.

2. Клапан спуска воздуха предназначен только для экстренных случаев. Поверните его в положение «ON», чтобы быстро спустить воздух из воздушных подушек.

3. Если воздушные подушки не функционируют, проверьте клапан и убедитесь, что он находится в положении «OFF».

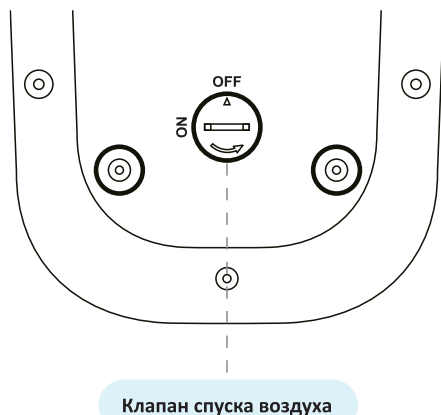

Уход и чистка

- Перед очищением устройства всегда отключайте прибор от электросети. Дайте прибору полностью остыть, прежде чем приступать к очистке.
- Слегка смочите мягкую ткань в воде или в растворе нейтрального моющего средства (3–5%).
- Аккуратно протрите загрязнённые участки корпуса влажной тканью. Запрещается использовать для чистки острые щётки, металлические инструменты, агрессивные вещества.
- Не допускайте попадания влаги на панель управления, так как это может вызвать её поломку. Для очистки панели управления используйте только сухую мягкую ткань.
- Не погружайте прибор или его части в воду или другие жидкости. Дождитесь полного высыхания прибора перед повторным использованием.
- Храните прибор в коробке, в безопасном сухом и прохладном месте, защищённом от прямых солнечных лучей.
- Избегайте хранения прибора вблизи источников тепла, открытого огня или под прямыми солнечными лучами, так как это может привести к его выцветанию или повреждению.
- Не допускайте контакта прибора с бензином, растворителями или любыми другими агрессивными веществами.

Рекомендации по устранению неполадок

Неисправность	Устранение
Аппарат не запускается	Низкий заряд батареи. Зарядите устройство.
Работа резко остановилась	1.Аккумулятор разряжен. Зарядите аккумулятор; 2.Истекло время работы устройства (15 минут). Перезапустите устройство.
Массажёр слегка шумит	Это нормальный рабочий шум внутреннего механизма.
Воздушные камеры не сжимаются/не надуваются	Проверьте, чтобы переключатель клапана на задней панели массажёра был выключён.

При возникновении проблем с массажёром оставьте заявку в сервисный центр.



Наименование: Массажёр для рук торговой марки «Rebodi»

Модель: A01

Номинальное напряжение: 5 В

Номинальная мощность: 10 Вт

Ёмкость аккумулятора: 2600 мА·ч

Вес прибора: 1,1 кг

Вес с упаковкой: 1,6 кг

Габариты массажёра (Ш × В × Д): 283 x 192,5 x 118,5 мм

Рекомендуемое время непрерывной работы: не более 15 минут

Адрес места производства: Building 1, No.30, QinFu Road, LiuYue South Community, HengGang Street, LongGang District, ShenZhen, China

Билдинг 1, № 30, Цинфу Роуд, Лиуюэ Саус Комьюнити, Хэнган Стрит, Лонган Дистрикт, Шэньчжэнь, Китай

Изготовитель: «Shenzhen Forrest Health Technology Co.,LTD»

Тел.: +86 139 2741 5158, sales1@forrestmassager.com

Дата производства: см. стикер на корпусе прибора

Импортер: ООО «МакТрейд», 188663, РФ, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г. п. Кузьмолловский, ул. Заводская, д. 3, корп. 361 А, пом. 182, тел. +7 (931) 337-6057, chilikin.maxx@gmail.com

Условия хранения, транспортировки, реализации и утилизации:

- Изделие не требует какого-либо монтажа или дополнительной фиксации.
- Хранение и транспортировка изделия должны производиться в сухом помещении. Изделие требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т. д.
- Реализация изделия должна производиться в соответствии с действующим законодательством РФ.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приёма электрического и электронного оборудования.

Условия гарантии

Гарантия предоставляется владельцу массажёра Rebodi. На устройство распространяется гарантийный срок в течение 1 (одного) года для домашнего использования. Если во время использования массажёра в нормальных условиях были обнаружены дефекты, фирма, согласно фактической дате получения письменного уведомления о дефектах в течение гарантийного периода, несёт ответственность за замену или ремонт устройства.

Данная гарантия не распространяется на повреждения в результате:

1. Неправильного использования устройства, несоблюдения инструкций по эксплуатации;
2. Использования принадлежностей, не поставляемых производителем или уполномоченным изготовителем;
3. Ремонта или технического обслуживания в неуполномоченной компанией Rebodi ремонтной организации;
4. Повреждений, которые не были вызваны производителем, в том числе повреждений при транспортировке;
5. Несчастного случая, злоупотребления, порчи, неправильного обращения с устройством;
6. Внесения несогласованных с производителем изменений в конструкцию.

Приобретайте официально поставляемую продукцию Rebodi – то есть ту, которая была предназначена Rebodi для реализации на территории Российской Федерации и официально ввезена в Россию уполномоченным импортёром. Официально поставляемая продукция комплектуется руководством по эксплуатации на русском языке, маркируется уникальным серийным номером с кодом импортёра, а также поддерживается электронной гарантией изготовителя по серийному номеру. При нелегальном ввозе продукции на территорию Российской Федерации нарушаются нормы таможенного законодательства и законодательства о защите прав интеллектуальной собственности. Авторизованные сервисные центры Rebodi не осуществляют бесплатную гарантийную поддержку продукции Rebodi, нелегально ввезённой в Россию.

Вы имеете право на гарантийное обслуживание только в тех авторизованных сервис-центрах, контактная информация которых указана в данном гарантийном талоне. Чтобы удостовериться, что изделие Rebodi предназначено для продажи на российском рынке и поддерживается гарантией Rebodi в указанных в данном гарантийном талоне сервисных центрах, вы можете проверить его серийный номер и получить соответствующее подтверждение от сервис-центра.

Гарантийный талон

Контактная информация авторизованного сервис-центра:

Компания «Maxmassage»

Адреса авторизованных сервисных центров в Москве и Санкт-Петербурге уточняйте на сайте maxmassage.ru/remont по телефону +7 (800) 222-32-11 (звонок бесплатный) или по электронной почте remont@maxmassage.ru

Быстро и удобно оставить заявку на ремонт можно через форму:

maxmassage.ru/remont

Для ускорения гарантийного обслуживания направьте заявку на диагностику и ремонт с подробным описанием дефекта устройства, приложенными фото или видео, отражающими суть проблемы. В письме укажите свои контактные данные, дату покупки, наименование фирмы-продавца и серийный № устройства.

Модель: Rebodi A01

Серийный номер (Serial no): _____

Фирма-продавец: _____

Дата продажи: _____

С условиями гарантии ознакомлен и согласен _____

(подпись покупателя)



Товар сертифицирован. Установленный производителем в соответствии с п. 2 ст. 5 Закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы данного изделия равен гарантийному сроку с даты продажи при условии, что изделие используется согласно правилам и рекомендациям, изложенным в настоящем руководстве по эксплуатации, и применяемым техническим стандартам. Информацию о соответствии можно найти по адресу: www.maxmassage.ru





Представительство в России:
Группа компаний «Maxmassage»
info@maxmassage.ru
Тел: 8 (800) 3333-627

maxmassage.ru